


## ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР FLP30-16

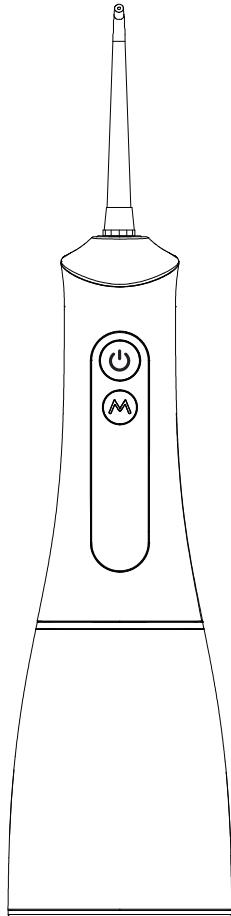

### ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрію, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрію та збережіть її для подальших довідок.

### Попереджувальні знаки в інструкції

Наступні знаки використовуються для класифікації та опису ступеня небезпеки, травм і матеріальних збитків, спричинених ігноруванням інструкції та неналежним використанням.

|  |          |   |
|--|----------|---|
|  | Увага    | Вказує на потенційну небезпеку, яка може привести до серйозних травм або смерті.            |
|  | Примітка | Вказує на потенційну небезпеку, яка може привести до незначних травм або пошкодження майна. |

Наступні позначки використовуються для певних пунктів інструкції, яких слід дотримуватися.

|  |  |
|--|--|
|  | Знак використовується для нагадування користувачеві про заборонені дії.  |
|  | Знак використовується для нагадування користувачам про пункти, яким необхідно слідувати для безпечної експлуатації виробу. |
|  | Знак використовується для нагадування користувачам про необхідність відкоригувати певні кроки для слідування інструкції    |

### Інструкції з техніки безпеки

#### УВАГА

##### Превентивні заходи для уникнення небезпеки

- ⊖ Не розміщуйте виріб у місці, де дитина або немовля може його дістати. І не дозволяйте їм торкатися виробу або використовувати його, щоб немовля чи дитина не з'їла частини які становлять небезпеку.

- ❗ Переконайтесь, що упаковка продукту також знаходиться в безпечному місці, куди дитина чи немовля не зможе дотягнутись, щоб уникнути небезпеки.

##### Зарядка

- ⊖ Не торкайтесь вологими руками до зарядного кабелю та блоку живлення при підключені чи відключені від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом та не травмуватись.

- ⊖ Не заряджайте виріб у ванні або у вологому місці, щоб уникнути ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

- ⊖ Якщо зарядний кабель або блок живлення пошкоджені або погано підключаються до мережі, не заряджайте ірігатор.  
У разі неправильного підключення ірігатор може бути пошкоджений.  
Не розтягуйте, не згинайте, не скручуйте і не стискайте шнур живлення.  
Не кладіть інші предмети на шнур живлення.

- ⊖ Не перевищуйте номінальне значення входної напруги, що зазначена на приладі під час заряджання. Якщо навантаження перевищить стандарти, це може привести до пожежі.

- ❗ Використовуйте джерело живлення з входною напругою не більше 5 В постійного струму, щоб запобігти ураженню електричним струмом, травмам або пожежі.

##### Несправності та поломки

- ❗ Якщо ви помітили будь-які порушення або збої в роботі пристрію, припиніть використовувати або заряджати його, щоб запобігти ураженню електричним струмом, травмам або пожежі.  
Аномалії та збої:

- Прилад чи кабель перегрівся чи деформувався.
  - Прилад чи кабель віддають запах гару.
  - Прилад чи кабель видає дивні/нестипові звуки під час використання
- В таких ситуаціях зверніться до авторизованого сервісного центру

##### Прилад

- ⊖ Будь ласка, уникайте ситуацій, де прилад може впасти чи вдаритись

- ⊖ Не розбирайте та не ремонтуйте виріб самостійно, щоб запобігти пожежі або травмам.  
- Зверніться до авторизованого сервісного центру.

- ❗ Прилад не призначений для використання особами з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, а також для осіб без досвіду та знань, напр. дітей.  
Вони можуть використовувати пристрій лише під наглядом опікуна.  
Опікун несе відповідальність за безпеку користувачів і повинен переконатися щоб вони не гралися з пристадом та використовували за призначением.

До цього приладу слід застосовувати спеціальні заходи захисту від електромагнітної сумісності (ЕМС). Якщо у вас є контролер пульсу або інший пристрій, проконсультуйтесь з лікарем перед використанням цього приладу.

Портативний і мобільний пристрій радіочастотного зв'язку може впливати на цей прилад. Використовуючи цей прилад, ви повинні тимчасово подалі від інших медичних пристрій, інакше це може спричинити електромагнітні перешкоди.

У разі виникнення перешкод негайно припиніть використання приладу та перенесіть його в інше місце використання, щоб запобігти нещасним випадкам або травмам.

#### Чищення

! Під час чищення блоку живлення чи зарядного кабелю обов'язково вийміть блок живлення з розетки, щоб запобігти нещасним випадкам або травмам.

! Регулярно чистіть блок живлення та перевіряйте кабель кожні 6 місяців, щоб запобігти накопиченню пилу.

! Волога може пошкодити ізоляцію, та може привести до пожежі. Вимкніть вилку джерела живлення та зарядний кабель, а потім протріть їх сухою тканиною.

#### ПРИМІТКА

##### Попередження нанесення пошкоджень зубів та ясен

! Цей прилад не слід використовувати людям з чутливими яснами або зубами.

Цей прилад не слід використовувати особам, чутливим до відчуття в роті. - Інакше це може пошкодити зуби чи ясен.

! Люди, які мають серйозні захворювання пародонту, лікують зуби або відчувають дискомфорт у ротовій порожнині, перед використанням необхідно проконсультуватися зі стоматологом. - Інакше це може привести до пошкодження зубів і ясен.

! Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім чищення порожнини рота.

! - Інакше це може привести до нещасних випадків або травм, якщо вода потрапить в очі, ніс, вуха або горло.

! Не наповнюйте резервуар водою з температурою вище 40 °C.

Інакше це може привести до опіків.

! Не діліться насадкою з родиною чи іншими користувачами.

Інакше це може спричинити інфекцію або запалення.

#### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ ПРОБЛЕМИ:

! Не допускайте під'єдання сторонніх предметів до зарядного кабелю чи джерела живлення, бо це може привести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

! Не намотуйте зарядний кабель на корпус під час зберігання. Інакше через пошкоджений зарядний кабель може бути коротке замикання, що приведе до опіків, ураження електричним струмом або пожежі.

! Будь ласка, не тягніть за кабель, від'єднуючи вилку зарядного пристрію. Інакше це може привести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

! Будь ласка, очищуйте та доглядайте за пристрієм після використання. (див. планове технічне обслуговування). Інакше ви можете нашкодити своєму здоров'ю через розмноження цвілі та різних бактерій на пристрії.

Будь ласка, не ремонтуйте та не обслуговуйте пристрій під час використання. Інакше можуть статися нещасні випадки та травми.


#### Характеристики

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Матеріал              | ABS (основа), PMMA(резервуар), PMMA (насадка)  |
| Розмір                | Приблизно 85,7* 71,7 * 293 мм                  |
| Вага                  | Приблизно 273 г                                |
| Акумулятор            | Lithium-ion                                    |
| Струм                 | Постійний                                      |
| Висота застосування   | 0-50 ° C (при стандартному атмосферному тиску) |
| Час зарядки           | никже 5000 м                                   |
| Режими                | до 8 год                                       |
| Час автономної роботи | до 60 хв після повної зарядки акумулятору      |
| Споживання енергії    | 7,5 Вт   |
| Вхідна напруга        | 5В---  |
| Рівень водостійкості  | IPX7   |



|      |   |
|------|---|
| !    | Режим очікування                                |
| !    | Тип ізоляції: обладнання класу BF               |
| !    | Нагадування користування                        |
| !    | Верхня і нижня межі температури                 |
| !    | Верхня і нижня межі вологості                   |
| !    | Директива ЄС з охорони навколошнього середовища |
| !    | Назва та адреса виробника                       |
| SN   | Серійний номер                                  |
| IPX7 | Рівень водостійкості                            |
| ---  | Знак постійного струму                          |

#### З'ємні частини

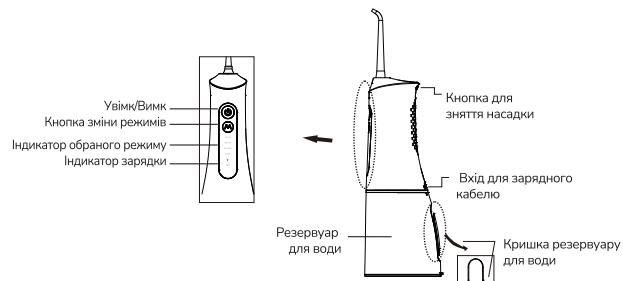

#### Посібник з використання

• Перед використанням: виконайте такі дії, щоб зарядити свій прилад:

! Перевірте та переконайтесь, що виріб і руки сухі, потім під'єднайте USB-кабель до адаптера живлення та вставте вилку в роз'єм джерела живлення (рис. 1). Вставте штекер USB-кабелю для заряджання у пристрій та переконайтесь, що штекер на місці (рис. 2).

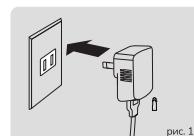


рис. 1

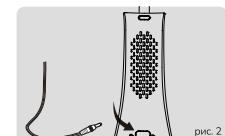


рис. 2

#### ПОРАДИ

Якщо червоний індикатор блимає 10 разів після використання або пристрій не вдається правильно увімкнути, це означає, що батарея має недостатній заряд, пристрій потрібно зарядити.

- Зарядка займає до 8 годин.
- Під час заряджання горить червоний індикатор.
- Зелений індикатор засвітиться, коли заряджання завершено.

## Щоденне обслуговування

1. Встановіть насадку в отвір у верхній частині основи (рис. 3-1). Якщо насадку потрібно замінити, спершу вимкніть прилад, а потім злегка натисніть кнопку розблокування насадки, щоб легко замінити насадку (рис. 3-2).
2. Налійте воду в резервуар наступним чином: відкрийте кришку резервуару, притягніть ірігатор горизонтальну, налійте воду в резервуар потім закрійте резервуар після наповнення водою (рис. 4).
3. Натисніть кнопку M, щоб обрати режим: Сильний - Нормальний - Масаж - Пульсуючий - Власний (DIY)

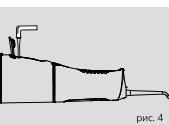
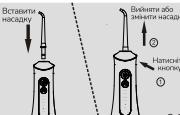


рис. 4




- 1-й режим (Сильний): безперервне розпилення води, триває 2 хвилини.
- 2-й режим (Нормальний): безперервне розпилення води, триває 2 хвилини. Цей режим підходить для більшості людей.
- 3 режим (Масаж): розпилення води три рази в секунду, триває 2 хвилини. Пульсуючий потік використовується для глибокого очищення і масажу ясен.

- 4-й режим (Пульсуючий): у цьому режимі натисніть верхню кнопку (уїмк/вімк.), щоб почати та продовжити розпилення води, відпустіть кнопку (уїмк/вімк.), щоб зупинити розпилення води. Якщо протягом 30 секунд не натисніть кнопку, він автоматично вимкнеться. Тиск розбрізкуваної води такий самий, як і налаштування "Власний" DIY.
- 5-й режим (Власний - DIY): після вибору цього режиму довго тисніть кнопку M, щоб налаштувати інтенсивність, зміну легшого - сильного тиску в циклах, кожен цикл триває 5 секунд. Цей режим підходить для початківців і чутливих людей, люди можуть вибрати легший тиск води для початку.

• У режимі очикування натисніть кнопку M, щоб перемкнути положення режиму. Якщо ви нічого не зміните та не користуєтесь приладом протягом 3 з він увійде знову в режим очикування.

### ! ПОРАДИ

4. Перед використанням тримайте ірігатор вертикально, насадкою в роті до зубів або ясен. Одночасно трохи відкрійте рот, щоб вода могла вільно текти (рис. 5 і 6).

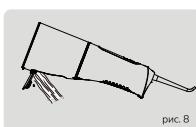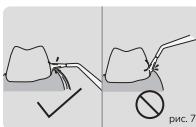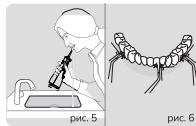

5. Натисніть кнопку "ON", щоб використовувати ірігатор. При використанні зверніть увагу на наступні моменти:

A) розмістіть насадку на одному рівні з лінією ясен і тримайте її перпендикулярно яснам;

B) повільно рухайте насадкою вздовж зубів, очищаючи їх по черзі;

C) ретельно очищайте зуби, брекети, коронки та протези.

Якщо ви використовуєте прилад вперше, спробуйте м'якіший режим протягом тижня, поки не адаптуєтесь.

Потім спробуйте інші режими.

### ! ПОРАДИ

Не розпилюйте воду безпосередньо в пародонтальну кишенню (рис. 7).

Після використання натисніть кнопку, щоб вимкнути прилад.

Цей прилад має функцію зворотного відліку для кожної програми.

Використовуйте обрану програму з функцією автоворикнення. Проте, якщо ви все ж захотите продовжити процедуру, натисніть кнопку "ON".

Прилад має функцію пам'яті програм.

Після використання виконайте наступне:

1. Відкрийте кришку резервуару та вилийте воду (рис. 8).

2. Натисніть уїмк/вімк., прилад запрацює і автоматично злийті воду з самого приладу (рис.9)

3. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути прилад, а потім закрійте кришку резервуару.

4. Витрійті прилад насухо сухою тканиною (рис.10).

### ! ПОРАДИ

Щоб уникнути поширення бактерій, переконайтесь, що в резервуарі немає залишків води. Якщо ви плануєте не використовувати прилад тривалий час, дайте йому просохнути перед тим, як покласти на зберігання.

поверніть резервуар, щоб розблокувати

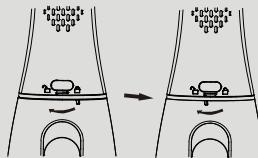


рис. 11

натисніть кнопку та зніміть кришку

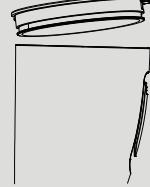
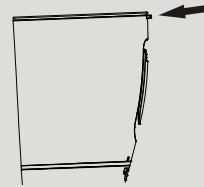


рис. 12

## Вирішення проблем


| Проблема                            | Причина   | Рішення   |
|-------------------------------------|---|---|
| Не працює                           | Щойно придбаний                                   | Будь ласка, зарядіть прилад до повного (до 8 год)     |
| Низький тиск при роботі             | Насадка чимось заблокована або деформувалася      | Замініть насадку                                      |
| Отвір подачі води заблоковано       | Акумулятор використав свої ресурси                | Очистіть отвір  |
|                                     | Недостатній час заряджання                        | Будь ласка, зарядіть прилад до повного (до 8 год)     |
| Під час зарядки не працює індикатор | Підключення живлення не коректне                  | Підключіть шнур живлення як вказано в інструкції      |
|                                     | Виникла несправність у ланцюзі заряджання приладу | Зверніться в авторизований СЦ                         |
| Вода не виходить                    | Щойно придбаний                                   | Витягніть насадку, щоб промити отвір сопла на корпусі |

## Утилізація


Війміть акумулятор

Не розбирайте прилад самостійно, якщо не плануєте утилізувати. Передчасне видалення призведе до пошкодження приладу. Перш ніж виймати акумулятор, від'єднайте вилку від мережі та зарядний пристрій.


1. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтесь, що він розряджений. Якщо вам потрібно його розрядити, ви можете натиснути кнопку "ON", щоб увімкнути прилад і дати ірігатору попрацювати, доки він автоматично не зупиниться.

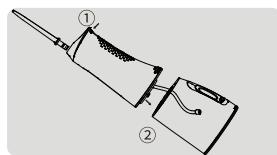


2. Натисніть кнопку вивільнення насадки (1), зніміть насадку та вийміть резервуар для води в напрямку, вказаному стрілкою (2).

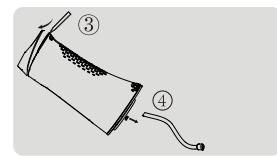


3. Зніміть верхню кришку основного корпусу в напрямку, указаному стрілкою (3); зніміть трубку та закрутіть кришку в напрямку, зазначеному стрілкою (4).

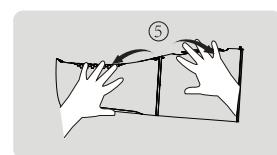


4. Встановіть резервуар назад, утримуйте основний корпус і резервуар двома руками, прокрутіть як зазначено на кроці (5):

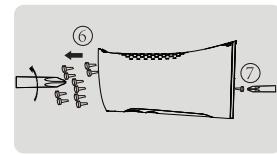

5. За допомогою хрестової викрутки відкрутіть і видаліть усі гвинти зверху (6) і 1 гвинт знизу (7)

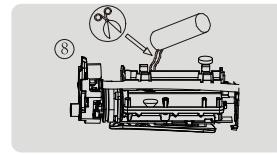

6. Вийміть внутрішній корпус і вийміть акумулятор (8).

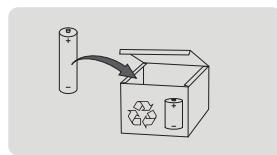


### ПРИМІТКА

! Належним чином переробляйте або утилізуйте акумулятор. Зверніться до місцевого відділу поворожнення зі відходами, якщо інші частини приладу підлягають переробці.

🚫 Будьте обережні, щоб не втратити позитні і негативні полюси батареї.  
Не заряджайте виріб після виймання батареї.

## Комплектація

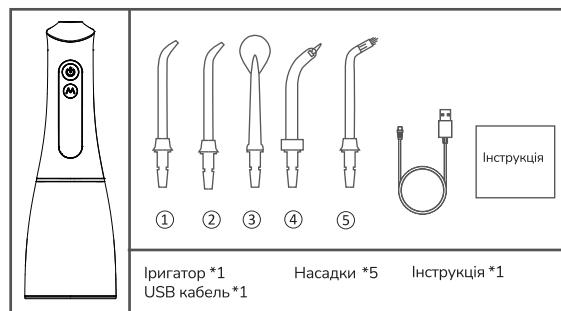

- ① Стандартна насадка: підходить для видалення залишків їжі для полоскання рота
- ② Стандартна насадка: підходить для видалення залишків їжі для полоскання рота
- ③ Насадка для чищення язика: підходить для очищення нальоту на язиці
- ④ Пародонтальна насадка: Рекомендується при парадонтозі та інших захворюваннях ясен
- ⑤ Ортодонтична насадка: Рекомендується для користувачів ортодонтичних апаратів або зубних протезів

### ПРИМІТКА

Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені наступними причинами, і на нього не поширюється його гарантія:

- пошкодження, викликані звичайним використанням (природне зношення приладу) або нещасними випадками, як-от падіння пристрію.
- неправильне використання або недбале ставлення до приладу
- використання кабелів, відмінних від тих, що входять у комплект.

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті [scandix.com.ua](http://scandix.com.ua)

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Імпортер: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,  
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ПІТЕРА А)

Виробник: Нінгбо Ciero Електрік Ко., Лтд  
No.239, Джангу Роад, Джангбей Дістрікт,  
Нінгбо /  
Ningbo Seago Electric Co., Ltd  
No.239, Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo

Зроблено в Китаї



До цього приладу слід застосовувати спеціальні заходи захисту від електромагнітної сумісності (ЕМС). Якщо у вас є контролер пульсу або інший пристрій, проконсультуйтесь з лікарем перед використанням цього приладу.

Портативний і мобільний пристрій радіочастотного зв'язку може впливати на цей прилад. Використовуючи цей прилад, ви повинні триматися подалі від інших медичних пристрій, інакше це може спричинити електромагнітні перешкоди.

У разі виникнення перешкод негайно припиніть використання приладу та перенесіть його в інше місце використання, щоб запобігти нещасним випадкам або травмам.

#### Чищення

Під час чищення блоку живлення чи зарядного кабелю обов'язково вийміть блок живлення з розетки, щоб запобігти нещасним випадкам або травмам.

Регулярно чистіть блок живлення та перевіряйте кабель кожні 6 місяців, щоб запобігти накопиченню пилу.

Волога може пошкодити ізоляцію, та може привести до пожежі. Вимкніть вилку джерела живлення та зарядний кабель, а потім протріть їх сухою тканиною.

#### ПРИМІТКА

##### Попередження нанесення пошкоджень зубів та ясен

Цей прилад не слід використовувати людям з чутливими яснами або зубами.

Цей прилад не слід використовувати особам, чутливим до відчуття в роті. - Інакше це може пошкодити зуби чи ясен.

Люди, які мають серйозні захворювання пародонту, лікують зуби або відчувають дискомфорт у ротовій порожнині, перед використанням необхідно проконсультуватися зі стоматологом. - Інакше це може привести до пошкодження зубів і ясен.

Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім чищення порожнини рота.

- Інакше це може привести до нещасних випадків або травм, якщо вода потрапить в очі, ніс, вуха або горло.

Не наповнюйте резервуар водою з температурою вище 40 °C.

Інакше це може привести до опіків.

Не діліться насадкою з родиною чи іншими користувачами.

Інакше це може спричинити інфекцію або запалення.

#### ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ ПРОБЛЕМИ:

Не допускайте під'єдання сторонніх предметів до зарядного кабелю чи джерела живлення, бо це може привести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Не намотуйте зарядний кабель на корпус під час зберігання. Інакше через пошкоджений зарядний кабель може бути коротке замикання, що приведе до опіків, ураження електричним струмом або пожежі.

Будь ласка, не тягніть за кабель, від'єднуючи вилку зарядного пристрію. Інакше це може привести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Будь ласка, очищуйте та доглядайте за пристрієм після використання. (див. планове технічне обслуговування). Інакше ви можете нашкодити своєму здоров'ю через розмноження цвілі та різних бактерій на пристрії.

Будь ласка, не ремонтуйте та не обслуговуйте пристрій під час використання. Інакше

можуть статися нещасні випадки та травми.


#### Характеристики

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Матеріал              | ABS (основа), PMMA(резервуар), PMMA (насадка)  |
| Розмір                | Приблизно 85,7* 71,7 * 293 мм                  |
| Вага                  | Приблизно 273 г                                |
| Акумулятор            | Lithium-ion                                    |
| Струм                 | Постійний                                      |
| Висота застосування   | 0-50 ° C (при стандартному атмосферному тиску) |
| Час зарядки           | никже 5000 м                                   |
| Режими                | до 8 год                                       |
| Час автономної роботи | 5  |
| Споживання енергії    | до 60 хв після повної зарядки акумулятору      |
| Вхідна напруга        | 7,5 Вт   |
| Вихідна напруга       | 5В---  |
| Рівень водостійкості  | під 90%  |
|                       | IPX7   |



|        |   |
|--------|---|
| ⊕      | Режим очікування                                |
| 为人图标   | Тип ізоляції: обладнання класу BF               |
| 警告图标   | Нагадування користування                        |
| 温度图标   | Верхня і нижня межі температури                 |
| 湿度图标   | Верхня і нижня межі вологості                   |
| 指令图标   | Директива ЄС з охорони навколошнього середовища |
| 工厂图标   | Назва та адреса виробника                       |
| SN图标   | Серійний номер                                  |
| IPX7图标 | Рівень водостійкості                            |
| ---图标  | Знак постійного струму                          |


#### З'ємні частини

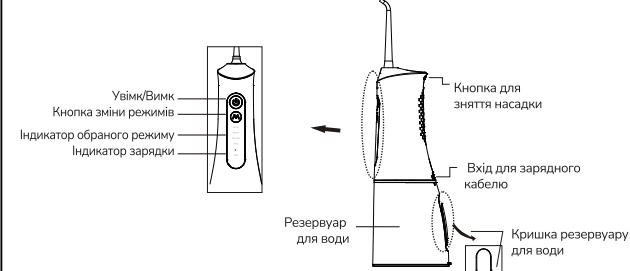

#### Посібник з використання

• Перед використанням: виконайте такі дії, щоб зарядити свій прилад:

• Перевірте та переконайтесь, що виріб і руки сухі, потім під'єднайте USB-кабель до адаптера живлення та вставте вилку в роз'єм джерела живлення (рис. 1). Вставте штекер USB-кабелю для заряджання у пристрій та переконайтесь, що штекер на місці (рис. 2).

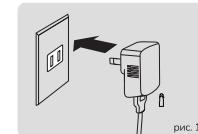


#### ПОРАДИ

Якщо червоний індикатор блимає 10 разів після використання або прилад не вдається правильно увімкнути, це означає, що батарея має недостатній заряд, прилад потрібно зарядити.


- Зарядка займає до 8 годин.
- Під час заряджання горить червоний індикатор.
- Зелений індикатор засвітиться, коли заряджання завершено.

Під час використання виконайте наступні дії:

1. Вставте насадку в отвір у верхній частині основи (рис. 3-1). Якщо насадку потрібно замінити, спершу вимкніть прилад, а потім злегка натисніть кнопку розблокування насадки, щоб легко замінити насадку (рис. 3-2).

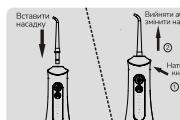

2. Налійте воду в резервуар настільним чином: відкрийте кришку резервуара, притримайте ірігатор горизонтальним положенням, налійте воду в резервуар потім закріть резервуар після наповнення водою (рис. 4).

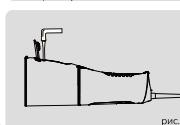

3. Натисніть кнопку M, щоб обрати режим: Сильний - Нормальний - Масаж - Пульсуючий - Власний (DIY)

• 1-й режим (Сильний): безперервне розпилення води, триває 2 хвилини.

• 2-й режим (Нормальний): безперервне розпилення води, триває 2 хвилини. Цей режим підходить для більшості людей.

• 3 режим (Масаж): розпилення води три рази в секунду, триває 2 хвилини. Пульсуючий потік використовується для глибокого очищення і масажу ясен.


• 4-й режим (Пульсуючий): у цьому режимі натисніть верхню кнопку [увімкн./вимк.], щоб почати та продовжити розпилення води, відпустіть кнопку [увімкн./вимк.], щоб зупинити розпилення води. Якщо протягом 30 секунд не натискати кнопку, він автоматично вимкнеться. Тиск розбрізкуваної води такий самий, як і налаштування режиму "Власний" DIY.

• 5-й режим (Власний - DIY): після вибору цього режиму довго тисніть кнопку M, щоб налаштувати інтенсивність, зміну легшого - сильного тиску в циклах, кожен цикл триває 5 секунд. Цей режим підходить для початківців і чутливих людей, люди можуть вибрати легший тиск води для початку.

• У режимі очищування натисніть кнопку M, щоб перемкнути положення режиму. Якщо ви нічого не зміните та не користуєтесь приладом протягом 3 з він увійде знову в режим очищування.

## І ПОРДИ

4. Перед використанням тримайте ірігатор вертикально, насадкою в роті до зубів або ясен. Одночасно трохи відкрійте рот, щоб вода могла вільно текти (рис. 5 і 6).

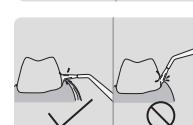

5. Натисніть кнопку "ON", щоб використовувати ірігатор. При використанні зверніть увагу на наступні моменти:


A) розмістіть насадку на одному рівні з лінією ясен і тримайте її перпендикулярно яснам;

B) повільно рухайте насадкою вздовж зубів, очищаючи їх по черзі;

C) ретельно очищайте зуби, брекети, коронки та протези.

Якщо ви використовуєте прилад вперше, спробуйте м'якіший режим протягом тижня, поки не адаптуєтесь.

Потім спробуйте інші режими.

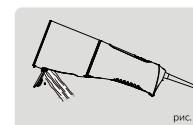

## І ПОРДИ

Не розплюйте воду безпосередньо в пародонтальну кишенню (рис. 7).



Після використання натисніть кнопку, щоб вимкнути прилад.

Цей прилад має функцію зворотного відліку для кожної програми.

Використовуйте обрану програму з функцією автоворміннення. Проте, якщо ви все ж захотите продовжити процедуру, натисніть кнопку "ON".

Прилад має функцію пам'яті програм.

Після використання виконайте наступне:

1. Відкрийте кришку резервуару та вилийте воду (рис. 8).



2. Натисніть увімкн./вимк., прилад запрацює і автоматично злийті воду з самого приладу (рис.9)

3. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути прилад, а потім закріть кришку резервуару.

4. Витріть прилад насухо сухою тканиною (рис.10).



## І ПОРДИ

Щоб уникнути поширення бактерій, переконайтесь, що в резервуарі немає залишків води. Якщо ви плануєте не використовувати прилад тривалий час, дайте йому просохнути перед тим, як покласти на зберігання.

## Щоденне обслуговування

1. Очищуйте виріб перед використанням або принайміні кожні 6 місяців, якщо ви ним не користуєтесь тривалий час.

2. Очищіть виріб чистою водою або нейтральним миючим засобом.

Не використовуйте корозійні або абразивні миючі засоби.

Не використовуйте гарячу воду (вище 50°C), щоб уникнути пошкодження продукту.

### Очищення основи:

● Очистіть корпус сухою або вологою тканиною.

⊖ Не мийте корпус під проточеною водою.

### Очищення резервуару для води:

● Протріть резервуар сухою або вологою тканиною або вийміть його та промийте чистою водою, резервуар можна відкріти, як показано на рис. 11 і 12;

● Якщо ви плануєте не використовувати ірігатор тривалий час, спорожніть резервуар для води.

### Очищення насадок:

● Ви можете використовувати суху чи вологу тканину для миття насадок та потім промити під проточеною водою, висушити.

⊖ Не згинайте, не тягніть і не скручуйте насадки.

● Стоматологи рекомендують міняти насадку кожні 3 місяці.

поверніть резервуар, щоб розблокувати

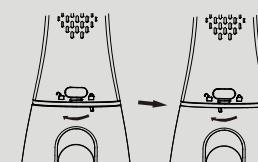


рис. 11

натисніть кнопку та зніміть кришку

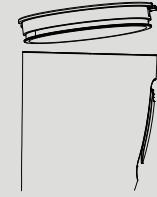
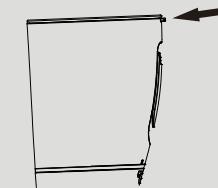


рис. 12

## Вирішення проблем


| Проблема                            | Причина   | Рішення   |
|-------------------------------------|---|---|
| Не працює                           | Щойно придбаний                                   | Будь ласка, зарядіть прилад до повного (до 8 год)     |
| Низький тиск при роботі             | Насадка чимось заблокована або деформувалася      | Замініть насадку                                      |
| Отвір подачі води заблоковано       | Акумулятор використав свої ресурси                | Зверніться в авторизований СЦ                         |
|                                     | Недостатній час заряджання                        | Будь ласка, зарядіть прилад до повного (до 8 год)     |
| Під час зарядки не працює індикатор | Підключення живлення не коректне                  | Підключіть шнур живлення як вказано в інструкції      |
|                                     | Виникла несправність у ланцюзі заряджання приладу | Зверніться в авторизований СЦ                         |
| Вода не виходить                    | Щойно придбаний                                   | Витягніть насадку, щоб промити отвір сопла на корпусі |

## Утилізація


Вийміть акумулятор

Не розбирайте прилад самостійно, якщо не плануєте утилізувати. Передчасне видалення призведе до пошкодження приладу. Перш ніж виймати акумулятор, від'єднайте вилку від мережі та зарядний пристрій.


1. Перш ніж виймати акумулятор, переконайтесь, що він розряджений. Якщо вам потрібно його розрядити, ви можете натиснути кнопку "ON", щоб увімкнути прилад і дати ірігатору попрацювати, доки він автоматично не зупиниться.

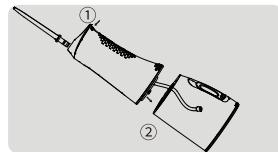


2. Натисніть кнопку вивільнення насадки (1), зніміть насадку та вийміть резервуар для води в напрямку, вказаному стрілкою (2).

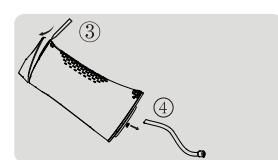


3. Зніміть верхню кришку основного корпусу в напрямку, указаному стрілкою (3); зніміть трубку та закрутіть кришку в напрямку, зазначеному стрілкою (4).

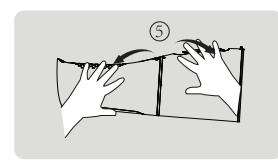


4. Встановіть резервуар назад, утримуйте основний корпус і резервуар двома руками, прокрутіть як зазначено на кроці (5):

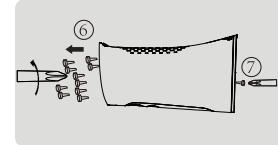

5. За допомогою хрестової викрутки відкрутіть і видаліть усі гвинти зверху (6) і 1 гвинт знизу (7)

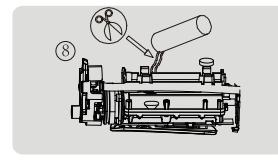

6. Вийміть внутрішній корпус і вийміть акумулятор (8).

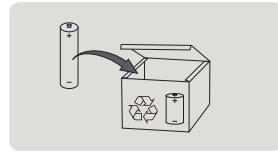


### ПРИМІТКА

! Належним чином переробляйте або утилізуйте акумулятор. Зверніться до місцевого відділу поворожнення з відходами, якщо інші частини приладу підлягають переробці.

🚫 Будьте обережні, щоб не втратити позитні і негативні полюси батареї.  
Не заряджайте виріб після виймання батареї.

## Комплектація

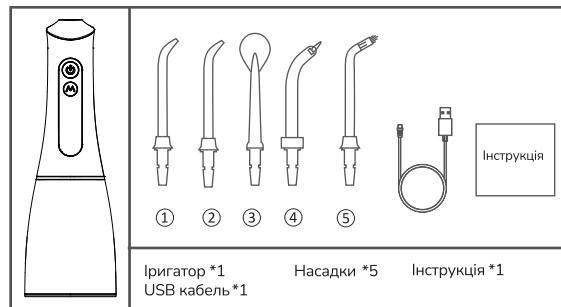

- ① Стандартна насадка: підходить для видалення залишків їжі для полоскання рота
- ② Стандартна насадка: підходить для видалення залишків їжі для полоскання рота
- ③ Насадка для чищення язика: підходить для очищення нaltıту на язиці
- ④ Пародонтальна насадка: Рекомендується при парадонтозі та інших захворюваннях ясен
- ⑤ Ортодонтична насадка: Рекомендується для користувачів ортодонтичних апаратів або зубних протезів

### ПРИМІТКА

Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені наступними причинами, і на нього не поширюється його гарантія:

- пошкодження, викликані звичайним використанням (природне зношення приладу) або нещасними випадками, як-от падіння пристрію.
- неправильне використання або недбале ставлення до приладу
- використання кабелів, відмінних від тих, що входять у комплект.

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті [scandix.com.ua](http://scandix.com.ua)

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **0 800 217 697**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Імпортер: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,  
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ПІТЕРА А)

Виробник: Нінгбо Ciero Електрік Ко., Лтд  
No.239, Джанху Роад, Джангбей Дістрікт,  
Нінгбо /  
Ningbo Seago Electric Co., Ltd  
No.239, Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo

Зроблено в Китаї

