



СТАЦІОНАРНИЙ ІРИГАТОР FLS57-25

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її для подальших довідок.




ШВИДКА ПРИМІТКА

Майте на увазі, що повзунок на ручці іригатора призначений виключно для м'якого регулювання інтенсивності в певному режимі. Він не відповідає за ввімкнення чи вимкнення живлення або режиму роботи пристрою.


Модель	Матеріал	Живлення	Метод подачі води
FLS57-25	ABS, PC	акумулятор	пульсуючий
Вхідна напруга	Об'єм резервуару	Час зарядки	Клас водонепроникності
5 В	570 мл	5 год	IPX7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

сумка для зберігання

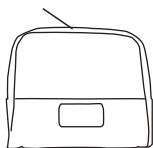


базовий блок приладу

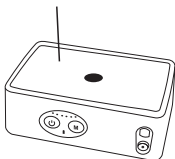

резервуар для води



кабель USB

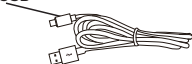

ручка приладу



насадка класична



насадка класична



насадка ортодонтична



насадка парадонтальна




насадка для чищення язика



ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ


1. Цю ручку можна від'єднати. Вставте ручку в отвір базового блоку. Після використання натисніть кнопку розблокування ручки, вийміть ручку з основи.

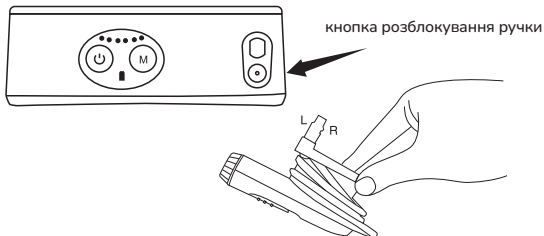


2. ВСТАВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ НАСАДОК.

Вставте насадку у центр ручки у верхній її частині. Сильно натисніть, доки насадка не стане на місце із звуком клацання.


Щоб зняти насадку із рукоятки, натисніть кнопку вивільнення насадки та витягніть її із ручки.

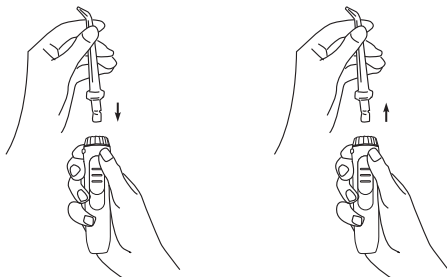


3. Наберіть воду в резервуар і правильно встановіть резервуар на базовий блок приладу.

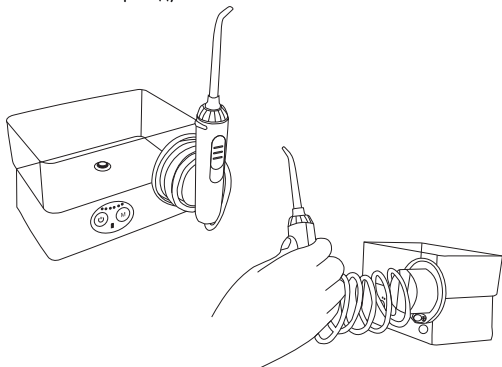


4. Натисніть кнопку вибору режиму, щоб вибрати більш високий тиск води перед використанням іригатора. Нагадування: 6 світлодіодних індикаторів вказують на різні режими тиску від мінімального до максимального. Тим, хто користується вперше та має чутливі зуби, рекомендується обирати найменший тиск

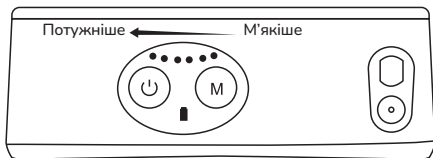

5. Додатково: трохи відрегулюйте тиск, посунувши кнопку регулювання тиску на ручці, коли пристрій увімкнено. Якщо вам потрібно вимкнути пристрій, натисніть кнопку вимикача на базовому блоці приладу.

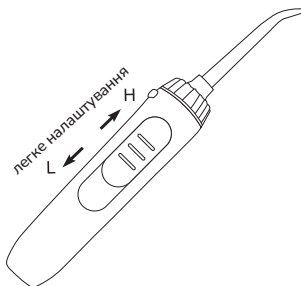


6. Почистіть зуби та ясна

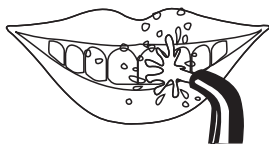


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАРЯДКИ ПРИЛАДУ

Для зарядки приладу підходять будь-які адаптери з вихідною напругою в 5 В.

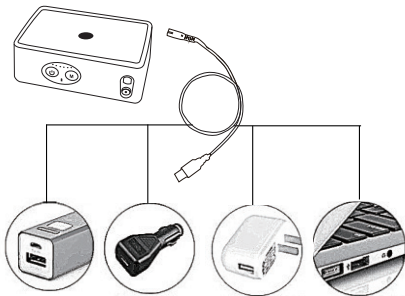

Коли акумулятор розряджається, індикатор блимає червоним. Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає зеленим кольором. Після повної зарядки індикатор перестане блимати та залишиться зеленим.

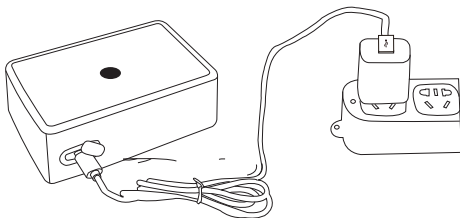


ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НАСАДОК




НАСАДКА СТАНДАРТНА

Станьте над раковиною та спрямуйте струмінь на зуби та ясна. Посуньте кнопку перемикача вгору, щоб запустити потік води. Тримайте рот злегка відкритим, щоб вода стікала в раковину. Спрямуйте струмінь контакт там, де зустрічаються зуб і ясна. Проводьте ручку так, щоб потік води переміщувався від зуба до зуба, пам'ятаючи про коротку паузу між кожним зубом.

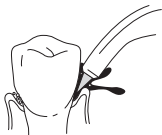

НАСАДКА ПАРАДОНТАЛЬНА

Помістіть пародонтальну насадку у контакт між зубами та лінією ясен. Притуліть м'яку насадку до зуба під кутом 45 градусів і обережно помістіть насадку під лінію ясен у кишеню. Запустіть іригатор, встановивши його на найнижчий тиск, і очищайте, обережно дотримуючись лінії ясен, водячи верхівкою насадки між зубами. Продовжуйте обводити лінію ясен, щоб помасажувати ясна та безпечно почистити водою ясенні кишені.

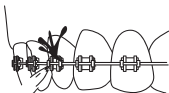

НАСАДКА ОРТОДОНТИЧНА

Використовуйте ортодонтичну насадку, у поєднанні з чистою щіткою, щоб промити важкодоступні місця навколо брекетів, коронок, мостів та імплантів. Почніть з останнього зуба. Помістіть насадку під кутом 90 градусів до зуба на лінії ясен. Акуратно проведіть насадкою уздовж лінії ясен, ненадовго зупинившись, щоб злегка почистити область між зубами та навколо ортодонтичної скоби перш ніж переходити до наступного зуба. Продовжуйте процес, поки ви все не почистите.



НАСАДКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЯЗИКА

Нахиліть голову над раковиною. Посуньте кнопку налаштування тиску до найнижчого значення. Увімкніть іригатор і помістіть насадку для чищення язика на задню частину язика та перемістіть його вперед, щоб очистити язик. Повторюйте поки не очистите весь язик.

УВАГА:

Щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травми людей:

Не підключайте цей пристрій до мережі з напругою, яка відрізняється від напруги, зазначеної на пристрої або зарядному пристрої.

Невідповідна напруга призведе до пошкодження приладу та втрати гарантії.

Якщо виріб з будь-якої причини було розібрано, гарантія втрачається.

Не використовуйте цей виріб, якщо він має пошкоджений шнур, якщо він не працює належним чином, якщо його впустили на підлогу чи іншу поверхню, пошкодили або впустили у воду. Будь ласка, зверніться по допомогу до авторизованого сервісного центру.

Не направляйте воду під язик, у вухо, ніс або інші делікатні місця. Цей прилад може створювати тиск, який може завдати серйозної шкоди в цих областях.

Не направляйте воду в ніс або вухо. Це потенційно смертельно. Різні бактерії можуть бути присутніми у деякій водопровідній або хлорованій колодязній воді та може бути смертельним, якщо були спрямовані ці області.

Якщо ваш лікар порадив вам отримати антибіотичну премедикацію перед стоматологічними процедурами, вам слід проконсультуватися зі своїм стоматологом перед використанням цього приладу або будь-якого іншого гігієнічного засобу.

Необхідний ретельний нагляд, коли цей прилад використовується дітьми чи інвалідами, на них або поблизу них.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з приладом. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час користування електричними виробами, особливо в присутності дітей, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

НЕБЕЗПЕКА:

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом:

- Не беріть зарядний пристрій мокрими руками.

- Не кладіть зарядний пристрій і не кидайте зарядний пристрій у воду чи іншу рідину.

- Перевірте кабель зарядного пристрою на наявність пошкоджень перед першим використанням і протягом терміну служби приладу.

Використовуйте цей прилад лише так, як зазначено в цих інструкціях або як рекомендовано вашим стоматологом.

Використовуйте лише рекомендовані нами поради та аксесуари. Не кидайте та не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори на приладі. Тримайте зарядний пристрій і шнур подалі від нагрітих поверхонь. Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі та не використовуйте його там, де використовуються аерозольні (розпилені) продукти або де подається кисень.

Не використовуйте в цьому продукті йод, фізіологічний розчин (розчин солі) або нерозчинні у воді концентровані ефірні олії. Використання таких рідин може знизити продуктивність і скоротити термін служби приладу. Використання цих рідин може призвести до втрати гарантії.

Наповніть резервуар водою або іншим розчином лише за рекомендацією стоматолога.

Перед використанням цього приладу видаліть будь-які прикраси, які можуть знаходитись у вашій ротовій порожнині або біля неї.

Не використовуйте, якщо у вас є рана на язиці або в роті.

ВИКОРИСТАННЯ

Обов'язково виливайте воду з резервуара після використання та запустіть прилад на 2-3 секунди, щоб злити воду повністю. Інакше бактерії можуть накопичуватися у воді, що залишилася. Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. За потреби протріть зовнішню поверхню м'якою тканиною та м'яким неабразивним миючим засобом. Резервуар можна мити водою з милом. Промийте бруд зсередини за допомогою щітки або чогось подібного (неабразивного), а потім протріть тканиною. Висушіть резервуар, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.

ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА

Пристрій містить літєву батарею. Після закінчення терміну служби акумулятора передайте пристрій у найближчий центр переробки відповідно до місцевих або державних вимог. Батарея не замінна.



ГАРАНТІЯ

Умови гарантії щодо даного приладу прописані в гарантійному листі, який йде у комплекті. Гарантія не поширюється на: пошкодження внаслідок неправильного використання, нормального/природнього зносу та використання, а також на дефекти, які мають незначний вплив на вартість або роботу приладу. Гарантія втрачає чинність, якщо ремонт виконується неавторизованими особами/сервісними центрами та якщо не використовуються оригінальні запчастини.

ПРИМІТКА: надмірне нагрівання призведе до зупинки приладу під час використання. Вимкніть прилад, охолодіть протягом 2 годин і перезапустіть.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті
scandix.com.ua

або скористатись послугою чат-боту, посилання на який можна
знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **(+38) 044 303 92 93**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь
ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу, збереження касового
чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

Виробник: Shenzhen BFT Electrical Appliances
Manufacturing Co., LTD
3F, Building 10, Changxing Industry park, Wan'an
Road, Shajing Town, Shenzhen, China

Шенжен БФТ Елестрікал Еплаянсїс Мануфас
турінг Ко., ЛТД
3Ф, Білдінг 10, Чангхінг Індастрі парк, Ванан
Род, Шайінг Таун, Шенжен, Китай

Представник: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)

