



scandi·x


НАБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗУБНИХ ЩІТОК TB7U SET

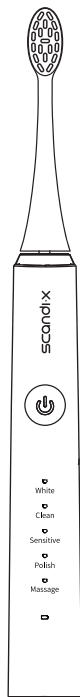


A

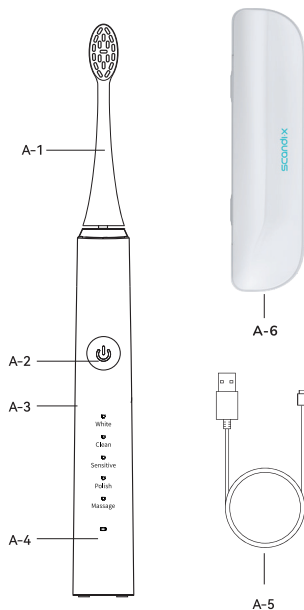

B

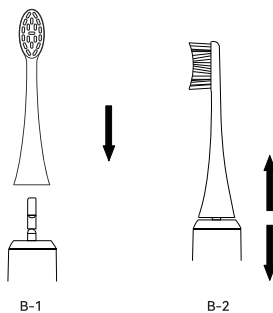

C

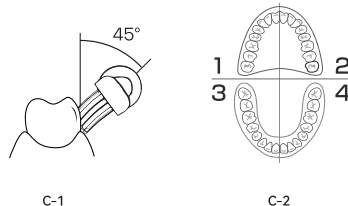

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Щоб забезпечити належну роботу цього пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її для подальших довідок.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

1. Цим приладом не можуть користуватися діти та люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони не отримали або не проінструктовані щодо безпечного використання приладу та не розуміють пов'язану з цим небезпеку.
2. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм. Чищення та обслуговування не повинні здійснюватися дітьми без нагляду.
3. Не використовуйте зарядний пристрій поза приміщенням або поблизу нагрітих поверхонь
4. Не очищайте головку щітки, ручку зубної щітки або зарядний пристрій у посудомийній машині.
5. Цей продукт призначений лише для чищення зубів, ясен і язика.
6. Не використовуйте його для інших цілей. Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря за допомогою, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт.
7. Припиніть використовувати головку щітки з пом'ятою або зігнутою щетиною. Заміняйте кожні 3 місяці або раніше, якщо з'являються ознаки зносу
8. Якщо зубна паста, якою ви користуєтесь, містить бікарбонат натрію, перекис або інший бікарбонат (звичайні інгредієнти відбілюючої зубної пасти), обов'язково ретельно вимивайте насадку щітки з милом після кожного використання, що може запобігти розтріскуванню пластику.
9. Якщо у вас була операція на ротовій порожнині або яснах протягом останніх 2 місяців, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед використанням цього приладу.

ПАРАМЕТРИ ПРИЛАДУ

Розмір приладу	27*26*24.7 mm
Вхідна напруга	5 В
Вхідна потужність	1.5 Вт
Матеріал корпусу/приладу	ABS/TPPE/Nylon
Час зарядки акумулятора	4 год
Водонепроникність	IPX7
Робоча температура	5-40°C

НАЗВА КОМПОНЕНТІВ

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|-----------------------|
| A-1 | Головка/насадка зубної щітки | A-4 | Індикатор заряду |
| A-2 | Багатофункціональна кнопка | A-5 | USB кабель |
| A-3 | Ручка приладу | A-6 | Футляр для зберігання |

ЗАМІНА ГОЛОВОК / НАСАДОК

- B-1 Встановлення: вставте головку щітки пазом вниз на основний корпус лицьовою стороною (щетинками) до вас;
- B-2 Розбирання: витягніть головку щітки із зусиллям у протилежному напрямку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ефективно очищує ротову порожнину (42000 обертів на хвилину).
2. 5 режимів (відбілювання, поєднаний, чутливий, полірування, масаж) для задоволення різних вимог.
3. Водонепроникний IPX7.
4. Безпечна та довговічна літєва батарея працює до 30 днів на повному заряді з нагадуванням про брак енергії.
5. Розумний таймер, автоматична зупинка через 2 хвилини та нагадування таймера кожні 30 секунд для зміни ділянки чищення допоможуть вам виробити хороші звички щодо чищення зубів.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

1. Змочіть щетину та нанесіть невелику кількість зубної пасти.
2. Прикладіть щетину до зубів від невеликим кут до лінії ясен (C-1).
3. Натисніть кнопку, щоб вибрати режим. Якщо ви знаєте режим, який використовували минулого разу, вам не потрібно вибирати режим знову. Є 5 режимів: відбілювання, поєднаний, чутливий, полірування, масаж.
4. ПРИМІТКИ: якщо під час чищення зубів натиснути кнопку, зубна щітка перейде в наступний режим і почне ще один 2-хвилинний цикл, а індикатор режиму засвітиться.
5. Злегка натискайте й обережно рухайте голівкою щітки вперед-назад по зубам.
6. Щоб максимізувати ефективність очищення, розділіть ротову порожнину на 4 частини. Почніть із секції 1 і чистіть кожну ділянку протягом 30 секунд. Чищення зубів призупинятиметься між кожними 30-секундними інтервалами, вказуючи, коли потрібно перейти до наступної секції. Зубна щітка автоматично зупиниться після 2 хвилин використання (C-2).

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАРЯДЖЕННЯ

1. Коли червоний індикатор блимає після використання або вибір не вдається нормально увімкнути. Це означає, що заряд акумулятора низький і прилад потрібно зарядити.
2. Коли вибір заряджається, індикатор горить червоним кольором. Коли акумулятор повністю заряджено, індикатор світитиметься зеленим. Тим часом заряджання автоматично вимикається, щоб запобігти перезарядженню акумулятора.
3. Під час першого використання або недостатньо зарядженого акумулятора протягом тривалого часу індикатор може не світитися протягом перших 5 хвилин.

УТИЛІЗАЦІЯ



1. Джерелом живлення цього продукту є літій-іонний акумулятор, який можна переробити. Після закінчення терміну служби виробу вийміть акумулятор, перш ніж викинути виріб, утилізуйте або утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих вимог поводження з відходами. Якщо у вас виникли запитання щодо переробки, зверніться до місцевого офісу з утилізації відходів, щоб отримати допомогу.
2. Перш ніж вирішите вийняти акумулятор, вам потрібно підготувати два інструменти: плоскугобіці та ножиці.
3. Під час використання інструментів дотримуйтеся основних правил безпеки та вживайте заходів захисту, щоб уникнути травм.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ ТА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **scandix.com.ua**

або скористайтеся послугою чат-боту, посилання на який можна знайти на сайті.

Номер гарячої лінії: **(+38) 044 303 92 93**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу. Зверніть увагу: зберігання масового чата є обов'язковою умовою для гарантієного обслуговування.

Виробник: Ningbo Seago Electric Co., Ltd
No.239, Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo/
Ningbo Seago Electric Co., Ltd
No.239, Джанху Род, Джангбей Дистрикт, Нінбо

Представник: ТОВ «ВФД», Україна, м. Київ,
вул. Є. Чавдар, буд. 5 (ЛІТЕРА А)
"VFD" LLC, 02072, Ukraine, Kyiv, 5 Yelyzavety
Chavdar str. (LETTER A)

